



## በ ኢ.ዚ.ሀ.ይ.ሊ.ር Easyhaler® ማስተንፈስ፣ እርምጃ በእርምጃ.

### መበጠጠጥ

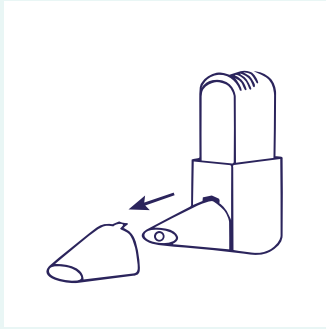


የመከላከያ ቆብ ከአፉ  
• መክደኛ ያንሱት

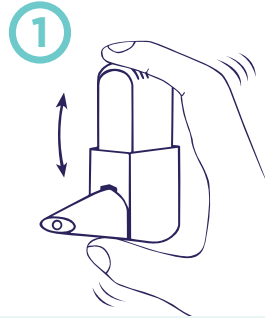


• **Easyhaler®** 3- እስከ 5-ጊዜ በአቀጣዊ አቅጣጫ በሃይል ወደ ላ ወዳ ታች አንቀሳቅሰው ይበጠጠጡት

### ጠቅ አድርጉ

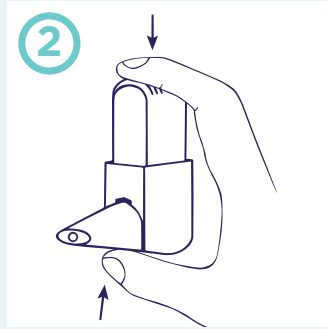

• መሣሪያውን በአቀጣዊ ይያዙ.  
• አንድ ጠቅታ እስኪሰሙ ድረስ በአውራ ጣትዎ እና በጣትዎ መካከል አጥብቀው ይጫኑ  
• ከዛ በኋላ በእርጋታ ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ ያድርጉ።

### ወደ ውስጥ መተንፈስ

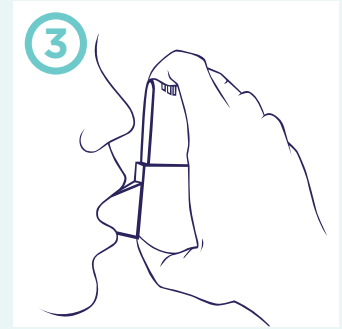

• በመደበኛነት ይተንፍሱ (ገን ወደ **Easyhaler®** ውስጥ አይደለም)  
• ከንፈርዎን በደንብ በ **Easyhaler®** ዙሪያ ያድርጉ  
• በ ኢ.ዚ.ሀ.ይ.ሊ.ር በኩል በጥብቅ እና በጥልቀት ይተንፍሱ  
• መሣሪያውን ያስወግዱ እና ትንፋሽን ለ 5 ሰከንድ ያህል ይያዙ :  
• ከዚያ ከመሳሪያው አጠገብ ያስተንፍሱ  
• የመከላከያ ቆቡን በአፉ መክደኛ ላይ ያግቡት :


በእያንዳንዱ መተግበሪያክአንድ በላይ የመድሃኒት መጠን ከታዘዘልዎት፣ ከ 1 እስከ 3 ያሉትን እርምጃዎች ይድገሙ።

! እርሾ የመያዝ አደጋን ለመቀነስ ፣ ሳይውጡት አፍዎን እና ጉሮሮዎን በውሀ ይታጠቡ።

### የመቁጠሪያ ማሳያ

Easyhaler® ስንት የመድሃኒት መጠን እንደቀሩ የሚያሳይ ቆጣሪ አለው።


- ከ የ 5ኛ መጠቀም በኋላ ቆጣሪው ወደፊት ይዞራል።
- ቀይ ምልክት የሚያመለክተው-20 ነጠላ መጠኖችን ብቻ እንደቀሩ ነው
- ቆጣሪው 0 ን ሲያሳይ ፣ ኢ.ዚ.ሀ.ይ.ሊ.ርን መተካት ያስፈልጋል

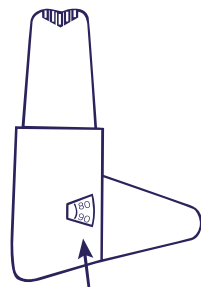

### የመከላከያ ሳጥን የሚጠቀሙ ከሆኑ

ለመተንፈስ Easyhaler® ከመከላከያ ሳጥኑ መቅጣት የለበትም።

- የመከላከያ ሳጥኑን ይክፈቱ።
- የመከላከያ ቆቡን ከአፉ መክደኛ ያላቅቁት
- ከ እርምጃ 2 እስከ 4 እንደተገለጸው፣ ወደ ውስጥ ያስተንፍሱ
- የመከላከያውን ቆብ ወደ አፉ መክደኛ ያስገቡት
- የመከላከያ ሳጥኑን ይዘጉ

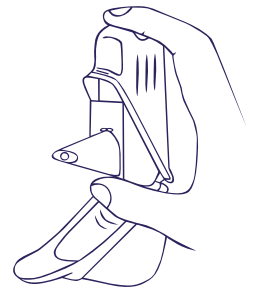


### አለአግባብ ከተጠቀሙ

የ Easyhaler® ቴክኖሎጂ ድርብ መጠንን ከመውሰድ ይከላከላል!

በሚከተለው ሁኔታ...

- **Easyhaler®** በስህተት የጫኑት ሲሆን ወይም በተደጋጋሚ የተጫኑት ከሆነ
- ወደ ማሳሪያው ውስጥ ካስተንፈሱ ይሄንን ያድርጉ...
- ኢ.ዚ.ሀ.ይ.ሊ.ር® ኢ.ዚ.ሀ.ይ.ሊ.ር በአፍ አካሉ ጠረጴዛ ጋ ወይም በእጅዎ ውስጥ ያንኩዋኩት

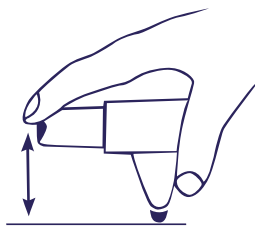

ተጨማሪ መረጃዎች እዚህ ሊያገኙ ይችላሉ:  
[www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de)



ORION Pharma GmbH  
Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg  
Fon 040-899689-0  
info-hamburg@orionpharma.com  
www.orionpharma.de

 Manufactured in Finland

