



Просте застосування: покрокове виконання інгаляцій із Easyhaler®.

Струсить

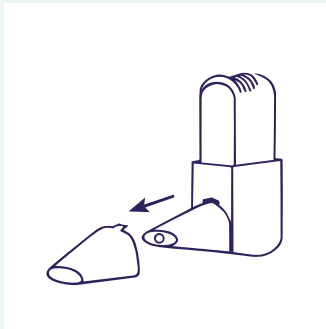


- Зніміть захисний ковпачок із мундштука

1

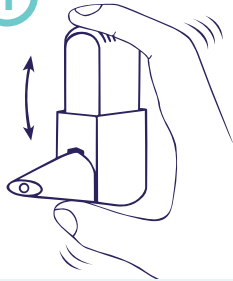


- Енергійно струсіть Easyhaler® у вертикальному положенні 3-5 разів

Натисніть

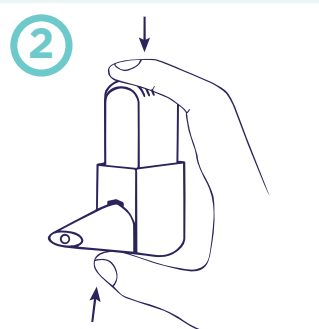

- Тримайте пристрій вертикально
- Один раз міцно натисніть великим і вказівним пальцями, доки ви не почуєте клацання
- Потім дайте пристрою повернутися у вихідне положення

Вдихніть

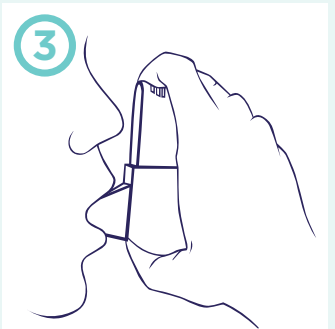

- Видихніть, як зазвичай (але НЕ в Easyhaler®)
- Щільно охопіть Easyhaler® губами
- Сильно та глибоко вдихніть через Easyhaler®
- Вийміть пристрій і затримайте дихання на 5 секунд
- Потім видихніть, випускаючи повітря поблизу пристрою
- Встановіть захисний ковпачок на мундштук


Якщо вам призначили більше ніж одну дозу за раз, повторіть пункти 1-3.

- ▮ Щоб знизити ризик зараження грибком, промийте рот і горло водою, НЕ ковтаючи її.

Показання лічильника

Easyhaler® має лічильник, який показує, скільки разових доз залишилося.


- Після кожного 5-го використання лічильник переміщується далі
- Червоне маркування означає, що залишилося лише 20 разових доз
- Коли лічильник добігає 0, Easyhaler® потрібно замінити

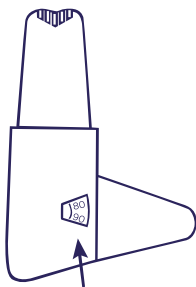

Якщо ви використовуєте захисний футляр

Для інгаляції НЕ потрібно виймати Easyhaler® із захисного футляра.

- Відкрийте захисний футляр
- Зніміть захисний ковпачок із мундштука
- Вдихніть, як описано в пунктах 1-3
- Встановіть захисний ковпачок на мундштук
- Закрийте захисний футляр

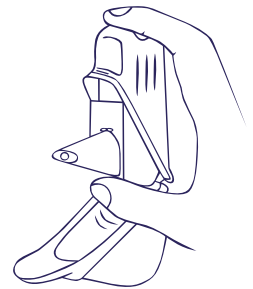

У разі неправильного використання


Технологія Easyhaler® запобігає подвійному дозуванню!

Якщо...

- ви випадково зарядили Easyhaler®
- ви видихнули в пристрій

Тоді...

- постукайте Easyhaler® мундштуком об поверхню столу або об руку

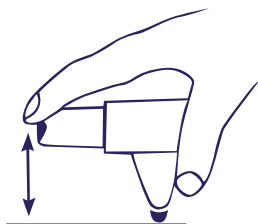

Детальну інформацію див. на сайті:
www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg
Телефон 040-89 96 89 -0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de

 Вироблено у Фінляндії

ORION
PHARMA